



# Thanks for your order!

Get started with your Reusable Breast Milk Storage Bags.  
Best for home-use.



No leaks



Easy to  
clean & use



Durable

**One-piece, double seal,** ensuring no leaks for better protection of the unique nutrients and components naturally present in your precious milk.

**Double usage:** Use it to store in a fridge or in your freezer.

**Reuse** each bag up to **500 times**.

## Instructions for use


# Reusable Breast Milk Storage Bags

## Návod k použití

# Opakovaně použitelné sáčky na skladování mateřského mléka Medela

## Návod na použitie

# Opakovane použiteľné vrecká na skladovanie materského mlieka Medela

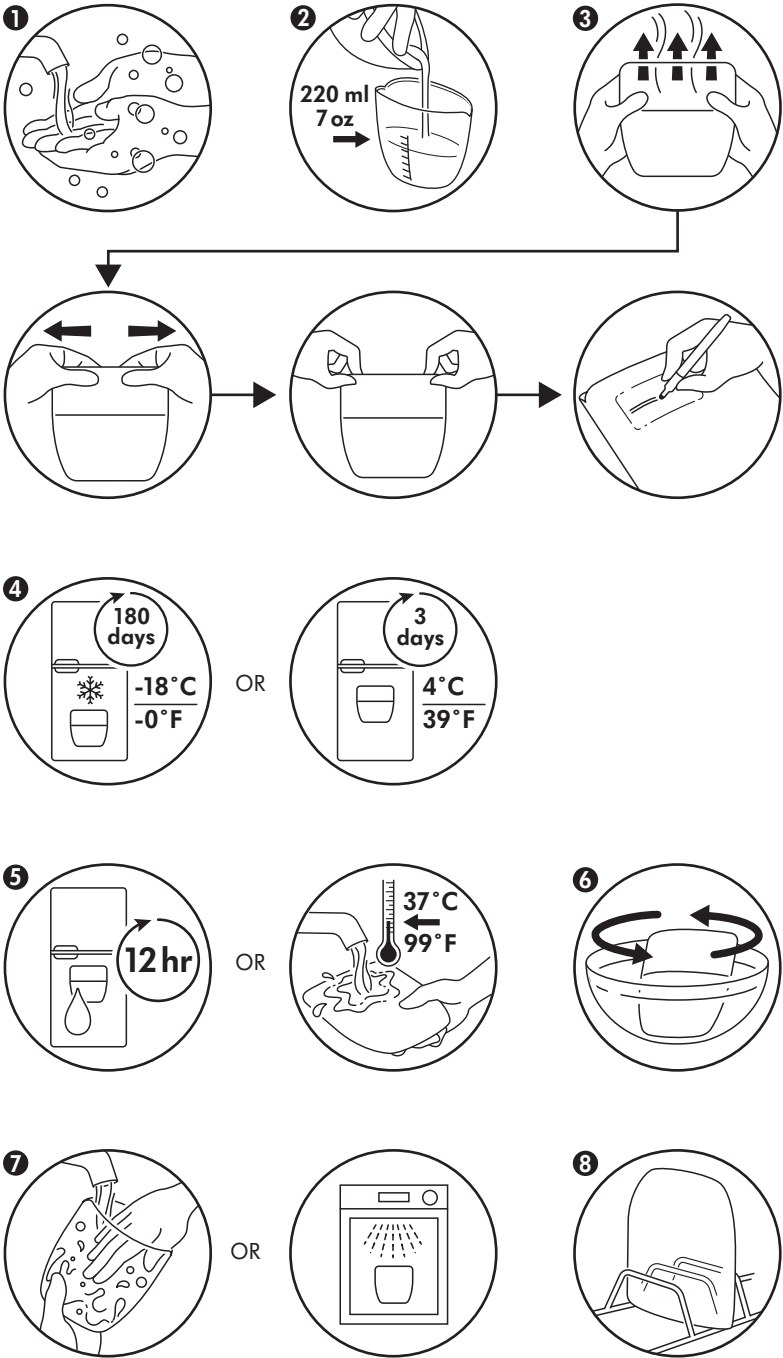

## ENGLISH

### Instructions for Use:

**Medela Reusable Breast Milk Storage Bags**  
**This bag is intended to be used for storing, transporting and warming up breast milk.**  
**Best for home-use.**

### Helpful Tips

- 1 Prior to first use, wash your hands with soap and clean the bag following instructions stated in 7.
- 2 Wash your hands with soap and water and dry thoroughly before touching the bag. Do not fill bag past the 220 ml / 7oz mark, breast milk expands as it freezes.
- 3 After filling, make sure the bag opening is clean and dry, gently remove the excess air from inside the bag and seal well. Seal and close the bag fully to avoid leakage. Label the breast milk storage bag before storing.
- 4 Refrigerate or freeze your breast milk immediately after expressing. Can be kept for 3 days in fridge or 180 days in the freezer. Avoid placing items > 1.2kg / 42oz on top of the bags when refrigerated or frozen.
- 5 To thaw, breast milk can be defrosted in the fridge in around 12 hours. Alternatively, hold the bag of frozen milk under warm running water (a maximum of 37 °C or 99 °F).
- 6 To warm your milk to body temperature (approx. 37°C or 99°F) by placing the storage bag into a bowl, jug or cup of lukewarm water. Gently swirl the storage bag during warming without shaking to mix the fat and other milk components.
- 7 Clean the bag immediately after use to avoid dry up of milk residues and to prevent from growth of bacteria. Rinse the bag in cold running water. Clean the bag using hand hot water with detergent, gently wipe the opening with a cloth, take care not to damage the bag when using a brush. Alternatively, you can wash the bags in the dishwasher upside down on the top rack (65°C or 149 °F). You can sanitize using the Quick Clean™ Microwave Bags or by boiling for 10 minutes (100°C or 212 °F).
- 8 After cleaning, allow the bag to air dry thoroughly in the upside-down position. After drying, seal it well and store it away until the next use. Avoid touching the inside of the bag.

**Material: Silicone**

**Disposal:** According to local regulations.

**Do not thaw frozen breast milk or warm breast milk in a microwave or a pan of boiling water to prevent burns.**

**Do not refreeze previously thawed breast milk.**

**Discard remaining breast milk after feeding the baby.**

**Each bag can be reused up to 500 times.**

**Keep the product away from sunlight. Food colorings may discolor components which will not affect performance.**

**Throw away at the first signs of damage or weakness.**

**Do not use a damaged product.**

**Contents may vary from picture.**

**Keep the product out of reach of children.**

**One-piece, double seal, ensuring no leaks for better protection of the unique nutrients and components naturally present in your precious milk.**

**Double usage:** Use it to store in a fridge or in your freezer.

## ČESKY

### Návod k použití

**Opakovaně použitelné sáčky na skladování mateřského mléka Medela**  
**Tento sáček je určen ke skladování, přepravě a ohřívání mateřského mléka.**

**Nejlepší pro domácí použití.**

### Užitečné tipy

- 1 Před prvním použitím si umyjte ruce mýdlem a očistěte sáček podle pokynů uvedených v části 7.
- 2 Než se sáčku dotknete, důkladně si umyjte ruce vodou a mýdlem. Sáček neplňte nad značku 220 ml / 7 oz. Mateřské mléko se při zmrazení rozpíná.
- 3 Po naplnění se ujistěte, že je otvor sáčku čistý a suchý, opatrně odstraňte přebytečný vzduch uvnitř sáčku a dobře jej uzavřete. Sáček zcela uzavřete a utěsněte, aby nedošlo k úniku. Před uskladněním sáček na skladování mateřského mléka označte štítkem.
- 4 Mateřské mléko ihned po odsátí uložte do chladničky nebo zmrazte. Lze je uchovávat po dobu tří dnů v chladničce nebo 180 dnů v mrazničce. Když jsou sáčky zchladené nebo zmrazené, nepokládejte na ně předměty o hmotnosti větší než 1,2 kg / 42 oz.
- 5 Mateřské mléko lze rozmrazit v chladničce přibližně za 12 hodin. Případně podržte sáček se zmrazeným mlékem pod teplou tekoucí vodou (maximálně 37 °C).
- 6 Mléko ohřejte na tělesnou teplotu (přibližně 37 °C) vložením sáčku do misky, konvice nebo hrnku s vlažnou vodou. Během zahřívání sáčkem jemně otáčejte, aniž byste jím třáslí, aby se tuk a ostatní složky mléka promíchaly.
- 7 Sáček vyčistěte ihned po použití, abyste předešli zaschnutí zbytků mléka a následnému množení bakterií. Opláchněte sáček studenou tekoucí vodou. Sáček vymyjte horkou vodou se saponátem, otvor jemně otřete hadříkem, při použití kartáče dávejte pozor, abyste sáček nepoškodili. Sáčky můžete také mýt v myčce nádobí dnem vzhůru na horním stojanu (65 °C). Sáčky můžete dezinfikovat pomocí sáčku Quick Clean™ do mikrovlnné trouby nebo varem po dobu deseti minut (při 100 °C).
- 8 Po vyčištění nechte sáček důkladně vyschnout na vzduchu dnem vzhůru. Po vysušení jej dobře uzavřete a uložte do dalšího použití. Nedotýkejte se vnitřku sáčku.

**Materiál: silikon**

**Likvidace:** Dodržujte místní předpisy.

**Nerozmrazujte zmrazené mateřské mléko ani neohřívajte mateřské mléko v mikrovlnné troubě nebo v hrnci s vařící vodou, aby nedošlo k popálení.**

**Již rozmražené mateřské mléko znovu nezmrazujte.**

**Po nakrmení dítěte zbývající mateřské mléko zlikvidujte.**

**Každý sáček lze použít až 500krát.**

**Chraňte před slunečním světlem. Potravinářská barviva mohou změnit barvu složek, což nemá vliv na funkčnost.**

**Při prvních známkách poškození nebo opotřebení výrobek vyhoďte.**

**Poškozený výrobek nepoužívejte.**

**Obsah se může od obrázku lišit.**

**Uchovávejte mimo dosah dětí.**

**Jednodielne dvojité těsnění, které zaručuje, že nedojde k úniku, pro lepší ochranu jedinečných živin a složek přirozeně obsažených ve vašem drahocenném mléce.**

**Dvojitě použití: Používejte ke skladování v chladničce nebo v mrazničce.**

## SLOVENSKY

### Návod na použitie

**Opakovane použiteľné vrecká na skladovanie materského mlieka Medela**  
**Toto vrecko je určené na skladovanie, prepravu a ohrievanie materského mlieka.**

**Najlepšie na domáce použitie.**

### Užitočné tipy

- 1 Pred prvým použitím si umyte ruky mydlom a vyčistite vrecko podľa pokynov uvedených v časti 7.
- 2 Predtým, než sa vrecko dotknete, si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom. Vrecko nenapĺňajte nad značku 220 ml / 7 oz. Materské mlieko sa pri zmrazení rozpína.
- 3 Po naplnení sa uistite, že je otvor vrecka čistý a suchý, opatrne odstráňte prebytočný vzduch vo vnútri vrecka a dobre ho uzavrite. Vrecko úplne uzavrite a utesnite, aby nedošlo k úniku. Pred uskladnením vrecko na skladovanie materského mlieka označte štítkom.
- 4 Materské mlieko ihneď po odsátí uložte do chladničky alebo zmrazte. Možno ho uchovávať tri dni v chladničke alebo 180 dní v mrazničke. Keď sú vrecká vychladené alebo zmrazené, nepokladajte na ne predmety s hmotnosťou vyššou ako 1,2 kg / 42 oz.
- 5 Materské mlieko možno rozmraziť v chladničke približne za 12 hodín. Prípadne podržte vrecko so zmrazeným mliekom pod teplou tečúcou vodou (maximálne 37 °C).
- 6 Mlieko ohrejte na telesnú teplotu (približne 37 °C) vložením vrecka do misky, kanvice alebo hrnčeka s vlažnou vodou. Počas ohrievania vreckom jemne otáčajte, netraste ním, aby sa tuk a ostatné zložky mlieka premiešali.
- 7 Vrecko vyčistite ihneď po použití, aby ste predišli zaschnutiu zvyškov mlieka a následnému množeniu baktérií. Opláchnite vrecko studenou tečúcou vodou. Vrecko umyte horúcou vodou so saponátom, otvor jemne utrite hadričkou. Pri použití kefy dávajte pozor, aby ste vrecko nepoškodili. Vrecká môžete umývať aj v umývačke riadu dnom nahor v hornom koši (65 °C). Vrecká môžete dezinfikovať pomocou vreciek Quick Clean™ do mikrovlnnej rúry alebo varením počas desiatich minút (pri 100 °C).
- 8 Po vyčistení nechajte vrecko dôkladne vyschnúť na vzduchu dnom nahor. Po vysušení ho dobre uzavrite a uložte do ďalšieho použitia. Nedotýkajte sa vnútra vrecka.

**Materiál: silikón**

**Likvidácia:** Dodržiavajte miestne predpisy.

**Zmrazené materské mlieko nerozmrazujte ani materské mlieko neohrievajte v mikrovlnnej rúre alebo v hrnci s vriacou vodou, aby nedošlo k popáleniu.**

**Už rozmrazené materské mlieko znovu nezmrazujte.**

**Po nakŕmení dieťaťa zvyšné materské mlieko zlikvidujte.**

**Každé vrecko možno použiť až 500-krát.**

**Chraňte pred slnečným svetlom. Potravinárske farbivá môžu zmeniť farbu súčastí, čo nemá vplyv na funkčnosť.**

**Pri prvých známkach poškodenia alebo opotrebovania výrobok vyhoďte.**


**Poškodený výrobok nepoužívajte.**

**Obsah sa môže od obrázka líšiť.**

**Uchovávejte mimo dosahu dětí.**

**Jednodielne dvojité těsnění, které zaručuje, že nedojde k úniku, pro lepší ochranu jedinečných živin a složek přirozeně obsažených ve vašem drahocennom mléku.**

**Dvojitě použití: Používejte na skladovanie v chladničce alebo v mrazničce.**

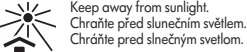

Keep away from sunlight.  
Chraňte před slunečním světlem.  
Chráňte pred slnečným svetlom.

Keep dry.  
Uchovávejte v suchu.  
Uchovávejte v suchu.

The packaging contains products intended to come in to contact with food according regulation 1935/2004.  
Obal obsahuje produkty určené k tomu, aby přicházely do kontaktu s potravinami podle nařízení 1935/2004.  
Obal obsahuje produkty určené k tomu, aby prichádzali do kontaktu s potravinami podľa nariadenia 1935/2004.

Read and follow the instructions for use.  
Přečtěte si a dodržujte Návod k použití.  
Přečítajte si a dodržujte Návod na použitie.

Do not heat in microwave.  
Neohřívajte v mikrovlnné troubě.  
Neohrievajte v mikrovlnnej rúre.



Medela Consumer AG  
Lättichstrasse 4b  
6340 Baar, Switzerland  
www.medela.com

© Medela AG

EU Responsible Person/Importer:  
Medela Medizintechnik  
GmbH & Co. Handels KG  
Georg-Kollmannsberger-Str. 2,  
85386 Eching, Germany  
www.medela.com/support

Medela UK Ltd  
Unit 3 Huntsman Drive  
Northbank Industrial Park, Irlam  
Manchester M44 5EG  
United Kingdom  
www.medela.com/support

Distributed by - Distribuido por - Distribuido por

Medela LLC  
1101 Corporate Drive,  
McHenry, IL 60050, USA  
Phone (800) 435-8316 or (815) 363-1166  
customer.service@medela.com  
www.medela.us  
www.medelamx.com

Medela Canada Inc.  
610 Applewood Crescent, Suite 401  
Vaughan, Ontario, Canada L4K 0E3  
Phone (800) 435-8316 or (905) 608-7272  
info@medela.ca  
www.medela.ca

Výhradní distributor pro ČR  
**DN FORMED Brno s.r.o.**  
Hudcova 487/76a, 612 00 Brno  
Telefon: +420 532 198 888  
E-mail: medela@medela.cz  
www.dnformed.cz

Výhradný distribútor pre SR  
**DN FORMED Brno s.r.o.,**  
**organizačná zložka**  
Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč  
Telefón: +421 948 792 576  
E-mail: medela@medela.sk  
www.medela.sk



MCAG Ref. IFU 101046562 - 03CF/V1.0