

Profesionální odsávací systémy

Inovovaná technologie - kvalitně koncipovaná v každém detailu



Katalog

platný od 1. 5. 2019

medela 

Made in Switzerland 

Spolehlivé a efektivní

Medela trvale vytváří nové normy inovačním vývojem svých výrobků. Odsávací přístroje a systémy Medela jsou maximálně spolehlivé. Odsávací technologie Medela rovněž splňuje nejpřísnější ekonomické a ekologické požadavky. Svým moderním systémem sběru tekutin dává společnost Medela k dispozici vysoce výkonné systémové komponenty – od bezpečného a hygienického odsávání až po ekologicky nezávadné odstraňování krve a jiných tělních tekutin.

Inovační koncepce výrobků

Odsávačky Medela jsou charakteristické svojí vysokou výkonností, dlouhou životností, tichým provozem a inteligentním bezpečnostním opatřením. Mimořádně spolehlivý chod a nenáročný provoz odsávaček garantuje splnění nejvyšších nároků kladených při odsávání. S komplexní řadou příslušenství nabízí Medela moderní účinná řešení.

MODERNÍ, BEZPEČNÉ, EFEKTIVNÍ

- ucelené řešení pro odsávání, čištění a desinfekci
- bezpečnost a spolehlivost pro široký rozsah aplikací
- jednoduchá obsluha
- vysoká užitná hodnota - hospodárnost



Víme, že naše produkty mohou být používány v těžkých podmínkách, pro citlivé a přesné postupy. Proto je samozřejmé, že vyvíjíme výrobky nejvyšší kvality. Kontinuálním výzkumem hledáme nové systémy a metody léčby. Investovali jsme do vývoje thoraxového systému nové generace, který sníží náklady a enormní časové zatížení personálu spojené s léčbou. Uživatelé našich lékařských odsávacích přístrojů se mohou spolehnout na technickou dokonalost a absolutní bezpečnost při jejich používání.



Michael Larsson, president představenstva

Precizní, odolná a spolehlivá

Nejdůležitějšími vlastnostmi odsávaček Medela jsou pohonný systém a regulátor vakua. Zatímco pohonná jednotka zajišťuje rychlé a spolehlivé vytvoření vakua, regulátor zaručuje jeho správnou hodnotu. Zejména u těchto komponentů je důležitá absolutní spolehlivost a perfektní funkčnost ve všech situacích. Proto Medela spoléhá na vlastní vývoj všech klíčových komponentů.

Pohonné systémy Medela

PÍSTOVÝ SYSTÉM

- vytváření podtlaku pomocí dvou pístů - u odsávaček Basic a Dominant Flex
- vysoké vakuum při nízkých otáčkách 70 ot. / min.
- tichý a spolehlivý, bez vibrací
- bezúdržbový provoz a dlouhá životnost

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE QUATROFLEX™

- vytváření podtlaku pomocí čtyř pístů - u odsávačky Vario
- vysoké vakuum při nízkých otáčkách
- odolnost a spolehlivost

VÝKONNÝ MEMBRÁNOVÝ SYSTÉM

- vytváří vakuum pomocí pružné membrány z pryže
- membrána poskytuje navíc ochranu proti znečištění vnitřní části přístroje

Regulátor vakua zajišťuje přesné nastavení vakua

MEMBRÁNOVÝ REGULÁTOR VAKUA - PRO NEJVYŠŠÍ PŘESNOST

- okamžité zajištění nejvyšší intenzity vakua
- vyvinut společností Medela na základě dlouholetých zkušeností
- rychlejší vytvoření vakua ve srovnání s konvenčními regulátory vakua
- zaručuje přesnou regulaci – u odsávaček Vario, Basic a Dominant Flex

Obsah

• Široký výběr odsávaček - přehledová sestava	6
• Elektrická odsávačka Clario	7 - 8
• Elektrická odsávačka Clario TONI	9 - 10
• Elektrická odsávačka Vario 18	11 - 12
• Elektrická odsávačka Basic	13 - 14
• Elektrická odsávačka Basic - vakuumextrakce	15 - 16
• Elektrická odsávačka Dominant Flex	17 - 18
• Liposukční sestava	19 - 20
• Elektrická odsávačka Thopaz+ - thorax	21 - 22
• Odsávačka proudová - přenosná verze	23
• Odsávačka proudová - pojízdná verze	24
• Sběrný systém jednorázový	25
• Sběrný systém pro opakované použití	26
• Příslušenství k odsávačkám	27 - 30

Široký výběr odsávaček

Vysoký výkon a efektivita

TYPY ODSÁVAČEK	CLARIO AC AC/DC AC/DC DELUXE	CLARIO TONI AC/DC AC/DC DELUXE	VARIO 18 AC AC/DC	BASIC AC	DOMINANT FLEX AC	THOPAZ + AC/DC	REGULÁTOR VÁKUA
Výrobce	Medela	Medela	Medela	Medela	Medela	Medela	Gce
Sací výkon (l/min)	15	15	18	30	60	5	70
Max. vakuum (kPa)	-80 (od -18)	-80 (od -9)	-75	-90	-95	-10	-95
(mmHg)	-600	-600	-563	-675	-713	-75	-950
OBLAST POUŽITÍ							
Endoskopie				✘	●		●
Plastická chirurgie				●	✘		
Porodnictví				✘	●		
ORL, (pro tracheostomiky)	✘	✘	✘	●			●
Gastroenterologie				✘			
THORAXOVÝ SYSTÉM							
Thoraxové sání						✘	
Kardiothoraxové sání						✘	
MÍSTA POUŽITÍ							
Transport pacienta	✘	✘	✘			✘	
Pohotovost			●	✘	●		●
ARO, JIP				✘	●	✘	✘
Operační sály				●	✘	✘	✘
Lůžkové oddělení	●	●	✘	●		✘	✘
Privátní sektor			●	✘			
Zubní chirurgie	✘	✘		✘	●		
Pečovatelské domy			✘	●			



Vysvětlivky:

ideální, doporučujeme,

napájení: AC - síť, AC/DC - síť/baterie

Určena pro dospělé i děti

Odsávačka Clario je spolehlivým prostředkem k uvolňování dýchacích cest.

OBLAST POUŽITÍ

Tracheostomické sání, odsávání z dýchacích cest.

Ideální pro domácí péči a na cesty, pečovatelskou službu, LDN, ambulance, sanitní vozy, lůžková oddělení.

Hygiena a nezávislost kdekoliv

TROJNÁSOBNÝ HYGIENICKÝ KONCEPT

- plovák v láhvi zabraňuje přesátí
- integrovaná bezpečnostní komora pro zachycení odsáté tekutiny v případě přesátí
- uzavřený membránový systém zamezuje vniknutí tekutiny do odsávačky

VÍCE VOLNOSTI A POHYBU

- napájení síťové (AC) nebo síťové/bateriové (AC/DC)
- možnost připojení kabelem na autobaterii (u verze AC/DC)
- praktická brašna s možností uchycení např. na vozík

SNADNÁ OBSLUHA

- pouze dva ovládací prvky
- jednoduchý třístupňový regulátor intenzity odsávání

PŘEDNOSTI

- snadná údržba
- tichý provoz
- malá, lehká, praktická, vhodná i na cesty



SPECIFIKACE

- sací výkon: 15 l/min
- podtlak: membránový regulátor vakua se 3 stupni nastavení:
 - minimum -135 mmHg, -18 kPa (+/- 15%)
 - medium -270 mmHg, -36 kPa (+/- 15%)
 - maximum -600 mmHg, -80 kPa (+/- 15%)
- speciální membránový systém zabraňující přesátí
- bezpečnostní komora
- světelná indikace chodu
- madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem
- napájení: síť (AC) nebo síť/baterie (AC/DC)
- provoz na baterii 50 min. (u verze AC/DC)
- možnost připojení kabelem na autobaterii (u verze AC/DC)

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1x set - láhev 0,5l + víčko s plovákem proti přesátí (nelze autoklávkovat)
- 1x hadice odsávací 5,5/8,5 mm, konektor/FingerTip, jednorázová, sterilní, 150 cm
- 1x síťový kabel s adaptérem
- 1x baterie NiMH (u verze AC/DC)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- brašna (u typu DeLuxe již v ceně společně s náhradní lahví a víčkem)
- kabel pro připojení na autobaterii (u verze AC/DC)
- manometr pro sledování vakua

ZÁRUKA

2 roky

OBJEDNACÍ ČÍSLA

N014.0014

Clario - AC



N014.0114

Clario - AC / DC



N014.0214

Clario - AC / DC DeLuxe



TECHNICKÁ DATA	
Klasifikační třída	IIa
Hmotnost	AC 1,7 kg, AC/DC 2,0 kg
Rozměr	V223 × Š255 × H95 mm
Příkon	220–240 V, 50 Hz
Výkon	110 W

Podrobný přehled příslušenství najdete na straně „Příslušenství odsávaček Medela“.

Určena pro novorozence, kojence a malé děti

Odsávačka Clario TONI je spolehlivým prostředkem k uvolňování dýchacích cest.

OBLAST POUŽITÍ

Tracheostomické sání, odsávání z dýchacích cest.

Ideální pro domácí péči a na cesty, pečovatelskou službu, LDN, ambulance, sanitní vozy, lůžková oddělení.

Hygiena a nezávislost kdekoliv

TROJNÁSOBNÝ HYGIENICKÝ KONCEPT

- plovák v láhvi zabraňuje přesátí
- integrovaná bezpečnostní komora pro zachycení odsáté tekutiny v případě přesátí
- uzavřený membránový systém zamezuje vniknutí tekutiny do odsávačky

VÍCE VOLNOSTI A POHYBU

- napájení síťové/bateriové (AC/DC)
- možnost připojení kabelem na autobaterii
- praktická brašna s možností uchycení např. na vozík

SNADNÁ OBSLUHA

- pouze dva ovládací prvky
- jednoduchý třístupňový regulátor intenzity odsávání

PŘEDNOSTI

- snadná údržba
- tichý provoz
- malá, lehká, praktická, vhodná i na cesty



SPECIFIKACE

- sací výkon: 15 l/min
- podtlak: membránový regulátor vakua se 3 stupni nastavení:
 - minimum -70 mmHg, -9 kPa (+/- -2,6 kPa)
 - medium -115 mmHg, -15 kPa (+/- -4,0 kPa)
 - maximum -600 mmHg, -80 kPa (pouze - -12 kPa)
- speciální membránový systém zabraňující přesátí
- bezpečnostní komora
- světelná indikace chodu
- madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem
- napájení: síť/baterie (AC/DC)
- provoz na baterii 50 min.
- možnost připojení kabelem na autobaterii

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1x set - láhev 0,5l + víčko s plovákem proti přesátí (nelze autoklávkovat)
- 1x hadice odsávací 5,5/8,5 mm, konektor/FingerTip, jednorázová, sterilní, 150 cm
- 1x síťový kabel s adaptérem
- 1x baterie NiMH

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- brašna (u typu DeLuxe již v ceně společně s náhradní láhví a víčkem)
- kabel pro připojení na autobaterii (u verze AC/DC)
- manometr pro sledování vakua

ZÁRUKA

2 roky

OBJEDNACÍ ČÍSLA

N014.0024

MEDELA Clario TONI - AC/DC

N014.0028

MEDELA Clario TONI - AC/DC De Luxe



TECHNICKÁ DATA	
Klasifikační třída	IIa
Hmotnost	AC/DC 2,0 kg
Rozměr	V223 × Š255 × H95 mm
Příkon	220–240 V, 50 Hz
Výkon	110 W

Podrobný přehled příslušenství najdete na straně „Příslušenství odsávaček Medela“.

Pohyblivost a flexibilita

Odsávačka Vario 18 zaručuje bezpečný a flexibilní provoz, je přizpůsobena individuálním potřebám a s integrovanou baterií se stává ideálním produktem pro mobilní pacienty.

OBLAST POUŽITÍ

Tracheostomické sání, odsávání z dýchacích cest.

Vhodná pro domácí péči, pečovatelskou službu, privátní praxi, záchranné služby, ambulance, lůžková oddělení.

Všestranné použití

NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE

- vytváření vakua speciální pístovou technologií QuatroFlex
- přesné nastavení vakua membránovým regulátorem
- vysoký stupeň bezpečnosti díky aretačnímu knoflíku

VOLITELNÁ VERZE

- napájení síťové (AC) nebo síťové/bateriové (AC/DC)
- možnost připojení kabelem na autobaterii (u verze AC/DC)
- možnost uchycení na vozík s eurolišťou

PŘEDNOSTI

- jednoduché nastavení a obsluha
- tichý provoz bez vibrací
- malá, lehká, praktická



SPECIFIKACE

- sací výkon: min. 18 l/min
- podtlak: - 75 kPa
- pístový odsávací systém s technologií QuatroFlex
- bezúdržbový provoz - bezmazný systém
- světelná indikace chodu
- madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem
- napájení: síť (AC) nebo síť/baterie (AC/DC)
- provoz na baterii 30 - 120min. dle nastaveného podtlaku (u verze AC/DC)
- dva integrované držáky lahví
- možnost připojení pojistné nádoby s víčkem proti přesátí, PS, autoklávovatelné
- možnost připojení na vozík s eurolištou a brzděnými antistatickými kolečky
- možnost připojení kabelem na autobaterii (u verze AC/DC)

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 5 x filtr kombinovaný proti přesátí/bakteriologický, jednorázový
- 1x hadice propojovací silikonová 7/12, autoklávovatelná, 25 cm
- 1x spojka propojovací přímá, autoklávovatelná
- 1x spojka propojovací 90°, autoklávovatelná
- 1x síťový kabel
- 1x hadice pacientská silikonová 7/12, autoklávovatelná, 180 cm
- 1x baterie NiMH (jen u verze AC/DC)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- vozík s eurolištou a brzděnými antistatickými kolečky
- brašna
- pojistná láhev s víčkem proti přesátí, PS, autoklávovatelné
- kabel pro připojení na autobaterii (u verze AC/DC)
- 1. varianta: Příslušenství pro sání do jednorázových odsávacích vaků
- 2. varianta: Příslušenství pro sání do autoklávovatelné láhve

ZÁRUKA

2 roky

OBJEDNACÍ ČÍSLA

N026.2112

N026.5112

MEDELA Vario 18 - AC

MEDELA Vario 18 - AC/DC

TECHNICKÁ DATA	
Klasifikační třída	IIa
Hmotnost	AC 3,5 kg, AC/DC 4,2 kg
Rozměr	V380 × Š170 × H285 mm
Příkon	220–240 V, 50 Hz
Výkon	80 W

Podrobný přehled příslušenství najdete na straně „Příslušenství odsávaček Medela“.

Inovovaný design s vyšším výkonem

OBLAST POUŽITÍ

Vhodná pro tracheální sání, ARO, JIP, lůžková odd., operační sály, ORL, urologii, endoskopii, gastroenterologii, gynekologii, vakuum extrakce, ORL, neonatologii, pediatrii, dentální kliniky a čelistní chirurgie, pohotovost, privátní lékařské praxe, LDN.

Účinná univerzální volba

TECHNOLOGIE NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ

- pístový systém pro rychlé vytvoření vakua
- membránový regulátor vakua pro přesný sací výkon

VELKÁ FLEXIBILITA

- přenosná nebo pojízdná verze
- ideální rozměry – vhodná pro každý typ endoskopického systému

VÝHODY

- velmi tichý a spolehlivý provoz
- dlouhá životnost
- snadné čištění a údržba



Přenosná verze



Pojízdná verze

SPECIFIKACE

- sací výkon: min. 30 l/min
- podtlak: - 90 kPa
- pístový odsávací systém s velmi rychlým nástupem vakua do 8 vteřin
- nízkootáčkový sací systém: 70 ot./min.
- hlučnost jen 36,3 dB
- maximálně tichý chod bez vibrací
- možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání – 24 hodin i více
- bezúdržbový provoz - bezmazný systém
- membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
- třístupňová ochrana proti přesátí
- světelná indikace chodu
- barevně značený manometr
- madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem, integrovaný držák pro 2 láhve
- možnost připojení nožního spínače ON/OFF nebo nožního regulátoru vakua
- možnost připojení na vozík s eurolišťou a brzděnými antistatickými kolečky

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1x láhev pojistná 0,25l proti přesátí, PS, autoklávovatelná
- 1x víčko pro láhev pojistnou, PS, autoklávovatelné
- 1x hadice propojovací silikonová 7/12, autoklávovatelná, 60 cm
- 2x spojka propojovací přímá, autoklávovatelná
- 1x síťový kabel
- 1x hadice patientská silikonová 7/12, autoklávovatelná, 180 cm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- vozík s eurolišťou a brzděnými antistatickými kolečky
- nožní spínač ON/OFF nebo nožní regulátor vakua
- držák síťové šňůry
- 1. varianta: Příslušenství pro sání do jednorázových odsávacích vaků
- 2. varianta: Příslušenství pro sání do autoklávovatelné láhve

ZÁRUKA

5 let

OBJEDNACÍ ČÍSLO

N071.0000

MEDELA Basic 35

TECHNICKÁ DATA	
Klasifikační třída	IIa
Hmotnost a rozměr přenosné verze	9,3 kg, V210 × Š305 × H375 mm
Hmotnost a rozměr pojízdné verze	16 kg, V965 × Š510 × H480 mm
Příkon	220–240 V, 50 Hz
Výkon	50 W
Sací systém – pístový	70 ot./min

Podrobný přehled příslušenství najdete na straně „Příslušenství odsávaček Medela“.

Kompletní systém pro vakuovou extrakci

OBLAST POUŽITÍ

Gynekologie – porodní sály

Šetrná pro matku i dítě

BEZPEČNÁ A JEMNÁ POMOC

- nezbytné a přesné vakuum během několika vteřin
- pístový odsávací systém
- menší kolísání vakua díky zásobníku

KOMPLETNÍ ŘADA PŘÍSLUŠENSTVÍ

- vakuum extraktory jednorázové nebo pro opakované použití
- možnost použití nožního regulátoru vakua

VÝHODY

- maximálně bezpečná pro matku a dítě
- tichý provoz bez vibrací
- dlouhá životnost
- spolehlivý bezúdržbový provoz



SPECIFIKACE

- sací výkon: 30 l/min.
- podtlak: - 90 kPa,
- pístový odsávací systém pro rychlý nástup vakua do 8 vteřin
- nízkootáčkový sací systém: 70 ot./min.
- hlučnost jen 36,3 dB
- maximálně tichý chod bez vibrací
- možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání – 24 hodin i více
- bezúdržbový provoz – bezmazný systém
- membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
- třístupňová ochrana proti přesátí
- světelná indikace chodu, barevně značený manometr
- madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem, integrovaný držák pro 2 láhve
- možnost připojení nožního regulátoru vakua
- možnost připojení na vozík s eurolištou a brzděnými antistatickými kolečky

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1x láhev pojistná 0,25l proti přesátí, PS, autoklávovatelná
- 1x víčko pro láhev pojistnou, PS, autoklávovatelné
- 1x hadice propojovací silikonová 7/12, autoklávovatelná, 60 cm
- 2x spojka propojovací přímá, autoklávovatelná
- 1x síťový kabel
- 1x hadice patientská silikonová 7/12, autoklávovatelná, 180 cm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- vozík s eurolištou a brzděnými antistatickými kolečky
- nožní regulátor vakua
- držák síťové šňůry
- 1. Varianta: Příslušenství pro sání do jednorázových odsávacích vaků
- 2. Varianta: Příslušenství pro sání do autoklávovatelné láhve
- vakuum extraktory jednorázové nebo pro opakované použití

ZÁRUKA

5 let

OBJEDNACÍ ČÍSLO

N071.0000

MEDELA Basic 35

VEX AUTOKLÁVOVATELNÝ - SILIKON



Silc Cup

Silc Cup - Trumpet

Caesar Cup

VEX JEDNORÁZOVÝ - PLAST



Bird Cup

Silc Cup

TECHNICKÁ DATA	
Klasifikační třída	IIa
Hmotnost a rozměr přenosné verze	9,3 kg, V210 × Š305 × H375m
Hmotnost a rozměr pojízdné verze	16 kg, V965 × Š510 × H480 mm
Příkon	220–240 V, 50 Hz
Výkon	50 W
Sací systém – pístový	70 ot./min

Podrobný přehled příslušenství najdete na straně „Příslušenství odsávaček Medela“.

Multifunkční elektrická odsávačka

OBLAST POUŽITÍ

Vhodná pro zákroky, které vyžadují proměnné průtoky: OP sály, chirurgie, neurochirurgie, ortopedie, traumatologie, ORL, endoskopie, porodní sály, plastické chirurgie - liposukce..

One-Touch / Volitelné nastavení průtoků

- 40 l / min: velmi tichý režim
- 50 l / min: standardní režim
- 60 l / min: turbo režim
- nejvýkonnější odsávačka systémů Medela

VÝHODY

- jedna univerzální multifunkční odsávačka pro více aplikací
- inovovaný design, spolehlivost
- doba čištění snížena díky Cleantouch™ dotykového tlačítka ON/OFF
- velmi rychlý nástup vakua do 8 vteřin
- přenosná nebo mobilní verze



SPECIFIKACE

- sací výkon volitelný: 40 / 50 / 60 l/min.
- proměnné průtoky
- podtlak: - 95 kPa
- pístový odsávací systém s velmi rychlým nástupem vakua do 8 vteřin
- nízkootáčkový sací systém: 70 ot./min.
- 3 tlačítka One-Touch pro změnu průtoku
- maximálně tichý chod bez vibrací
- možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání – 24 hodin i více
- bezúdržbový provoz - bezmazný systém
- membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
- třístupňová ochrana proti přesátí
- světelná indikace chodu
- barevně značený manometr
- možnost připojení nožního spínače ON/OFF nebo nožního regulátoru vakua
- možnost připojení na vozík s eurolišťou a brzděnými antistatickými kolečky

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1x láhev pojistná 0,25l proti přesátí, PS, autoklávovatelná
- 1x víčko pro láhev pojistnou, PS, autoklávovatelné
- 1x hadice propojovací silikonová 7/12, autoklávovatelná, 60 cm
- 2x spojka propojovací přímá, autoklávovatelná
- 1x síťový kabel
- 1x hadice patientská silikonová 7/12, autoklávovatelná, 180 cm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- vozík s eurolišťou a brzděnými antistatickými kolečky
- nožní spínač ON/OFF nebo nožní regulátor vakua
- držák síťové šňůry
- 1. varianta: Příslušenství pro sání do jednorázových odsávacích vaků
- 2. varianta: Příslušenství pro sání do autoklávovatelné láhve

ZÁRUKA

5 let

OBJEDNACÍ ČÍSLO

N071.0003

MEDELA Dominant Flex 65

TECHNICKÁ DATA	
Klasifikační třída	IIa
Hmotnost a rozměr přenosné verze	9,3 kg, V210 × Š305 × H375mm
Hmotnost a rozměr pojízdné verze	16 kg, V965 × Š510 × H480 mm
Příkon	220–240 V, 50 Hz
Výkon	50 W
Sací systém – pístový	70 ot./min

Podrobný přehled příslušenství najdete na straně „Příslušenství odsávaček Medela“.

Liposukční sestava

Spolehlivá a profesionální technika
pro spolehlivé a profesionální výsledky

Sestava pro liposukci

DOMINANT FLEX 65 - ODSÁVAČKA MEDELA

- nejvýkonnější chirurgická odsávačka s proměnnými průtoky
- pístový systém s velmi rychlým nástupem vakua do 8 vteřin
- sací výkon volitelný, nastavitelný: 40 / 50 / 60 l/min.
- podtlak: - 95 kPa
- vhodná pro dlouhodobý provoz
- vysoká spolehlivost a životnost
- tichý bezúdržbový provoz
- membránový regulátor pro přesné nastavení vakua
- přenosná i pojízdná verze
- možnost odsávání do jednorázových MedelaVaků
- záruka 5 let

DP30 LIPOPLUS - INFILTRAČNÍ PUMPA NOUVAG

- pumpe je navržena speciálně pro infiltraci kapaliny při odstraňování tukové tkáně formou tumescenční liposukce
- po aplikaci je procedura liposukce snadnější, bezpečná a zanechává příznivé kosmetické výsledky
- průtok: 1–27 l/h
- plynulá regulace průtoku nožním pedálem Vario
- záruka 2 roky



Příslušenství

INFILTRACE

- infiltrační sety jednorázové, sterilní
obj. č.: N6022 (min. objednávk. množství bal. 10 ks)
- infiltrační jehly jednorázové sterilní
obj. č.: N15885492 - 1,1 x 120 mm (bal. 100 ks)
možnost dodání i jiných velikostí - katalog na vyžádání
- držák s infiltračními kanylymi nerez - katalog na vyžádání



ODSÁVÁNÍ

- držák s odsávacími kanylymi nerez - katalog na vyžádání



LIPOSURG - Kompaktní infiltrační systém pro vibrační liposukci

- kombinovaný systém infiltrační pumpy a mikroprocesorem řízeného vibračního motorového systému
- šetří lékaři čas, fyzickou námahu a umožňuje mu jemné provádění operačních zákroků
- plynulá regulace průtoku nožním pedálem Vario
- průtok až 27 litrů / hod.



Všechny přístroje, nástroje a spotřební materiál je možné pořídit samostatně nebo v kompletu, který si zvolíte.

Kardiochirurgický a hrudní digitální drenážní systém

Thopaz+ je malý a lehký kompaktní přístroj s integrovaným zdrojem odsávání.

Nová generace digitálního systému pro hrudní drenáž Thopaz+ umožňuje zdravotníkům dělat přesná rozhodnutí, která pomáhají zlepšit výsledky léčby snížením délky hospitalizace pacienta a kontrolovat náklady spojené s léčbou. Thopaz+ je navržen tak, aby přesně sledoval pooperační únik vzduchu a intrapleurální tlak při současném měření množství odsáté tekutiny.

Lepší klinické výsledky

PŘESNÉ SLEDOVÁNÍ KLÍČOVÝCH PARAMETRŮ

- průběžné monitorování úniku vzduchu, podtlaku a množství kapaliny
- parametry k dispozici v reálném čase
- zobrazení trendů za posledních až 72 hodin

SNADNÉ POUŽITÍ

- zjednodušení každodenní kontroly hrudní drenáže a poskytování zlepšené provozní funkce
- ovládání tlačítky a barevný displej zabezpečují intuitivní ovládání a manipulaci
- snadná manipulace s minimální kontaminací přístroje

KOMFORT A MOBILITA PACIENTA

- alarmy a oznámení
- automatické stmívání displeje a tichý provoz
- dobíjecí akumulátory
- lehký, přenosný a kompaktní design



Objektivní údaje a přesnost







Data mohou být přenesena do PC kabelem USB



Dobíjecí dok



Transportní popruh

POŽADAVKY NEJMODERNĚJŠÍCH FOREM LÉČBY POMOCÍ THORAXOVÉHO ODSÁVÁNÍ	SPECIFIKACE VÝROBKU	PŘÍNOSY
 Zlepšuje mobilitu	<ul style="list-style-type: none"> kompletní systém s integrovaným zdrojem sání malé rozměry malá hmotnost 	<ul style="list-style-type: none"> rychlejší zotavení po operaci více pohodlí snížení pracovního vytížení ošetrovatelského personálu provoz na baterii 4-10 hodin dle četnosti provozu
 Umožňuje digitální dokumentaci	<ul style="list-style-type: none"> elektronické měření a monitorovací funkce možnost přenosu dat do PC 	<ul style="list-style-type: none"> poskytování klinických kritérií potřebných pro optimální řízení hrudní drenáže a pro rozhodnutí o odstranění drénu doplňkové údaje o terapii pro doplnění karty pacienta podklady pro případ pojistné události a zodpovědnosti za škodu
 Zaručuje bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> jednoduchá obsluha alarmový management 	<ul style="list-style-type: none"> nesprávná montáž / připojení není možné včasný zásah při vzniku problémů nebo nepravdivosti v průběhu terapie
 Zohledňuje výsledky výzkumu	<ul style="list-style-type: none"> vyvinutý na základě mezinárodně ověřené a kontrolované studie 	<ul style="list-style-type: none"> efektivita a bezpečnost thoraxového sání je vědecky potvrzena

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- síťový kabel nabíjecí, CD-ROOM

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kanystry

- Pro optimalizaci drenáže a omezení množství odpadu jsou k dispozici tři velikosti kanystrů na odsátou tekutinu. Kanystry jsou jednorázové, sterilní a obsahují protipěnicí kapsle pro zpřesnění odpočtu odsáté tekutiny. Je možné zvolit mezi obsahem 0,3l, 0,8l a 2,0 litry.

Hadice

- Systém dvojité hadice zajišťuje průběžné sledování tlaku, odsávaného vzduchu a tekutiny. K dispozici jsou hadice s jedním nebo dvěma konektory*, malého nebo velkého průměru.
*Jeden ze dvou konektorů je v případě potřeby možné zaslepit tzv. Krytkou konektoru obj.č. N079.0039. Všechny hadice jsou jednorázové, sterilní a obsahují odběrový port.

Dok nabíjecí

- Může stát na rovné ploše nebo může být uchycen na eurolištu. Doporučeno použití dokovací stanice pro zabezpečení přesného měření odsávané tekutiny přístrojem Thopaz+.

Adaptér k doku pro láhev 2,0 l

- Nutné zakoupit pro dok nabíjecí při používání 2l kanystru.

Držák s eurolištu

- Pro uchycení přístroje na vertikální nebo horizontální tyč (např. infuzní stojan nebo rám postele). Pomáhá při převozu pacienta a zvyšuje bezpečnost přístroje.

Popruh transportní

- Umožňuje snadný přenos odsávačky pacientem a zajišťuje jeho včasnou mobilitu.

USB kabel

- Určen pro přenos dat do PC.

ZÁRUKA: 2 roky, OBJEDNACÍ ČÍSLO: N079.1002

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Klasifikační třída	IIb
Nízké vakuum	-10 kPa, -75 mmHg, -100 mbar/cm H ₂ O (+/- 15%)
Nízký průtok	5 l/min (+/- 10%)
Hmotnost	1 kg
Rozměr	V230x Š170 x H90 mm
Krytí	IP33
Příkon	220 - 240 V, 50 Hz
Výkon	20 W

Odsávačka proudová

Přenosná verze

OBLAST POUŽITÍ

Vhodná pro ARO, JIP a všechna oddělení s lůžky umístěnými poblíž centrálních rozvodů vakua. Láhev je uchycena na eurolištu poblíž lůžka pacienta.

REGULÁTOR VAKUA GCE:

- Regulátor Medievac+ 1000 s rychlospojkou
 - podtlak: - 950 mbar (-95 kPa)
 - průtok: 70 l/min. +/- 5%
 - otočný manometr 360 °C, barevně značený
 - diagonální nastavení přepínače zapnuto/vypnuto
 - pojistný ventil (- 250 mbar) na ochranu pacienta
 - plynulá regulace podtlaku z centrálního rozvodu vakua
 - hadicový nástavec
- Hadice propojovací se spojkou, silikonová, autoklárovatelná
- Pacientský okruh silikonový autoklárovatelný nebo PVC sterilní jednorázový
- Držák láhve na eurolištu s pojistnou sponou
- Stop ventil



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SÁNÍ DO JEDNORÁZOVÝCH ODSÁVACÍCH VAKŮ MEDELA:

- Láhev PC, objem 1,5 litru nebo 2,5 litru
- Medela vak – objem 1,5 litru nebo 2,5 litru (vak obsahuje víčko, zpětný ventil, pojistný ventil proti přesátí, předfiltr a spec. bakteriologický filtr, možná doba sání do vaku až 4 dny)

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SÁNÍ DO LAHVÍ MEDELA:

- Láhev PS, objem 1 až 5 litrů, autoklárovatelná
- Víčko k láhvi s kónickou spojkou 6–10 mm, autoklárovatelné

ZÁRUKA: Na regulátor 2 roky

Podrobný přehled příslušenství najdete na straně „Příslušenství odsávaček Medela“.

Odsávačka proudová

Pojízdná verze

OBLAST POUŽITÍ

Vhodná pro ARO, JIP a všechna oddělení s lůžky umístěnými poblíž centrálních rozvodů vakua. Láhev je uchycena na pojízdném vozíku.

REGULÁTOR VAKUA GCE:

- Regulátor Medievac+ 1000 s držákem na eurolištu, rychlospojkou a vakuovu propoj. hadicí
 - podtlak: - 950 mbar (-95 kPa)
 - průtok: 70 l/min. +/- 5%
 - otočný manometr 360 °C, barevně značený
 - diagonální nastavení přepínače zapnuto/vypnuto
 - pojistný ventil (- 250 mbar) na ochranu pacienta
 - plynulá regulace podtlaku z centrálního rozvodu vakua
 - hadicový nástavec
- Pacientský okruh silikonový autoklávovatelný nebo PVC sterilní jednorázový
- Držák láhve na eurolištu s pojistnou sponou
- Stop ventil
- Vozík s eurolištu a brzděnými antistatickými kolečky

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SÁNÍ DO JEDNORÁZOVÝCH ODSÁVACÍCH VAKŮ MEDELA:

- Láhev PC, objem 1,5 litru nebo 2,5 litru
- Medela vak – objem 1,5 litru nebo 2,5 litru (vak obsahuje víčko, zpětný ventil, pojistný ventil proti přesátí, předfiltr a spec. bakteriologický filtr, možná doba sání do vaku až 4 dny)

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SÁNÍ DO LAHVÍ MEDELA:

- Láhev PS, objem 1 až 5 litrů, autoklávovatelná
- Víčko k láhvi s kónickou spojkou 6–10 mm, autoklávovatelné

ZÁRUKA: Na regulátor 2 roky

Podrobný přehled příslušenství najdete na straně „Příslušenství odsávaček Medela“.



Maximální hygiena - ochrana personálu i pacienta

Jednorázový sběrný systém splňuje dvě základní potřeby – jednoduchou manipulaci a vysokou bezpečnost.

Jednoduchá manipulace

- zřetelné barevné rozlišení objemu vaků i lahví zabraňuje jejich možné záměně
- pojistná spona fixuje láhev v držáku - při vyjmutí vaku zůstává láhev bezpečně uchycena v držáku
- vakuový vstup v integrovaném držáku láhve umožňuje, aby během výměny vaku zůstala vakuová hadice stále propojena
- úhlová spojka patientské hadice o průměru až 11 mm umožňuje odsátí velkých částic a zabraňuje zalomení hadice
- dva úchyty na vaku umožňují snadnou obsluhu pravou nebo levou rukou
- polykarbonátovou láhev lze desinfikovat až na 100 °C
- vaky s krystalizátorem nebo bez něj (krystalizátor způsobuje ztuhnutí sekretu)
- láhve lze propojit do série pomocí konektorů nebo přepínače vaku
- flexibilní - možnost dodání vaku s PVC odsávací hadicí, přerušovačem sání - FingerTipem nebo stop ventilem

Vysoká bezpečnost

- dvouvrstvý vak zajišťuje maximální pevnost a zabraňuje prostupování zápachu
- materiál Polyamid/Polyethylen
- možnost použití vaku u jednoho pacienta až 4 dny (ekonomická úspora)
- skladovatelnost 3 roky od data výroby uvedeného na obalu/krabici i víčku vaku
- barva značení: 1,5 l systém – žlutá, 2,5 l systém – oranžová
- bez krystalizátoru nebo s krystalizátorem

Medela vak obsahuje

víčko, patientský vstup s úhlovou spojkou a ucpávkou, vstup pro sériové propojení a ucpávku, 2 úchyty, ochranný kryt proti přesátí, zpětný ventil s navigací kapaliny zabraňující zpětnému toku sekretu a snižující pění, filtrační komoru, předfiltr, který zabraňuje průchodu kouře a částic aerosolu do filtru, bakteriální a hydrofobní filtr s lapačem nečistot.



Modulární a kompatibilní

Jednoduché použití při zachování maximální bezpečnosti

LÁHVE

- vyrobeny z velmi kvalitního polysulfonu odolného proti nárazu a vysoké teplotě - možnost autoklávování do 134°C
- objem lahví: 0,25 , 0,5, 1, 2, 3 a 5 litrů
- možnost propojení do série
- variabilní držáky lahví



VÍČKA

- víčka s integrovaným těsněním jsou vylisována z jednoho druhu materiálu – polysulfonu
- díky této speciální technologii nedochází k nežádoucímu pnutí materiálu při následném autoklávování
- pojistný ventil zabraňuje přesátí
- víčko velké – pro lahve 1, 2, 3 a 5 litrů
- víčko malé – pro lahve 0,25 a 0,5 litru



víčko velké

víčko malé

FILTRY

















- filtr bakteriologický autoklávovatelný s výměnnými jednorázovými vložkami
 - snižuje náklady na spotřební materiál
- filtry jednorázové
 - bakteriologické, proti přesátí, uhlíkové protipachové



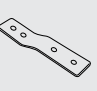


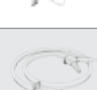

























filtr autoklávovatelný




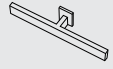

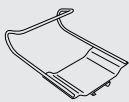

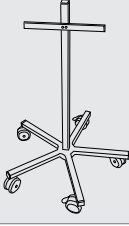


filtr jednorázový

Příslušenství k odsávačkám






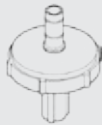

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV A POPIS	OBRÁZEK
Příslušenství CLARIO		
N074.0001	Set – láhev + víčko, Clario/Clario TONI • láhev 0,5 l – neautoklárovatelná • víčko s plovákem proti přesátí neautoklárovatelné, ZP-náhradní díl	
N074.0002	Komora bezpečnostní, Clario/Clario TONI Neautoklárovatelná. ZP-náhradní díl	
N074.0003	Hadice odsávací 5,5/8,5 mm, konektor/FingerTip, jednorázová, sterilní, 150 cm, Clario/Clario TONI ZP-ANO, klasifikační třída I	
N074.0005	Baterie NiMH, Clario/Clario TONI AC/DC ZP-náhradní díl	
N074.0006	Manometr, Clario/Clario TONI ZP-NE	
N074.0007	Brašna, Clario/Clario TONI ZP-NE	
N074.0008	Ventil k bezpečnostní komoře, Clario/Clario TONI – 1 ks Autoklárovatelný, ZP-náhradní díl	
N074.0009	Kroužek „O“ těsnící modrý pro spojky přímé, 90°a Clario/Clario TONI bal. 10 ks, ZP-náhradní díl	
N074.0010	Plovák proti přesátí k víčku, Clario/Clario TONI, autoklárovatelný, bal. 10 ks, ZP-náhradní díl	
N074.0017	Kabel s možností připojení na autobaterii, Clario/Clario TONI AC/DC ZP-NE	
Příslušenství VARIO		
N077.0105	Adaptér pro láhev PC na Medela-Vaky, Vario – 1ks Autoklárovatelný, ZP - NE	
N077.0524	Držák nádstavný nerez pro 2l láhev, Vario Pro uchycení 2l láhve na čelní stěnu Varia, nutno současně objednat i držák "C" N077.0523. ZP-NE	
N077.0821	Držák se šroubem na eurolištu, Vario ZP-NE	
N077.0831	Brašna, Vario ZP-NE	
N077.0832	Kabel pro připojení na autobaterii, Vario AC/DC ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.1728	Baterie NiMH, Vario AC/DC ZP-NE	
N077.0951	Hadice odsávací 5,5/8,5 mm, kónický konektor/FingerTip, jednorázová, sterilní, 180 cm, Vario ZP-ANO, klasifikační třída I	













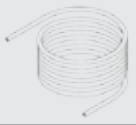


OBJ. ČÍSLO	NÁZEV A POPIS	OBRÁZEK
Příslušenství THOPAZ/THOPAZ+		
N079.0011	Kanystř protipěnicí 0,3l, jednorázový, sterilní, Thopaz/Thopaz+ , 1ks bal.: 12 ks, ZP-ANO, třída I	
N079.0016	Kanystř protipěnicí 0,8l, jednorázový, sterilní, Thopaz/Thopaz+ , 1ks bal.: 6 ks, ZP-ANO, třída I	
N079.0018	Kanystř protipěnicí 2,0l, jednorázový, sterilní, Thopaz/Thopaz+ , 1ks bal.: 6 ks, ZP-ANO, třída I	
N079.0021	Hadice s jedním konektorem, jednorázová, sterilní, Thopaz/Thopaz+ , 1 ks bal.: 10 ks, ZP-ANO, třída I	
N079.0022	Hadice se dvěma konektory, jednorázová, sterilní, Thopaz/Thopaz+ , 1ks bal.: 10 ks, ZP-ANO, třída I	
N079.0025	Hadice s 1 velkým konektorem, jednorázová, sterilní, Thopaz/Thopaz+ , 1 ks bal.: 10 ks, ZP-ANO, třída I	
N079.0026	Hadice se 2 velkými konektory, jednorázová, sterilní, Thopaz/Thopaz+ , 1ks bal.: 10 ks, ZP-ANO, třída I	
N079.0039	Krytka konektoru hadice, sterilní, Thopaz/Thopaz+ bal.: 20 ks, ZP-ANO, třída I	
N079.0031	Popruh transportní, Thopaz ZP-NE	
N079.1006	Popruh transportní, Thopaz + ZP-NE	
N079.0034	Kabel USB, Thopaz/Thopaz+ ZP-NE	
N079.0036	Držák s eurolišťou pro uchycení na horiz. tyč, Thopaz/Thopaz + ZP-ANO, klasifikační třída I	
N079.0040	Držák s eurolišťou pro uchycení na vert. nebo horiz. tyč, Thopaz/Thopaz + ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0148	Kabel síťový nabíjecí, Thopaz/Thopaz + ZP-NE	
N087.0059	Kabel síťový nabíjecí, Thopaz + ZP-NE	
N079.0037	Dok nabíjecí, Thopaz/Thopaz+ ZP-ANO, klasifikační třída I	
N079.0038	Adaptér pro 2,0 l láhev k doku, Thopaz/Thopaz + ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0123	Membrána těsnící, Thopaz/Thopaz+ , 1 ks bal. 10 ks, ZP-Náhradní díl	
N077.1456	Manometr testovací -10 kPa, Thopaz/Thopaz+ ZP-NE	



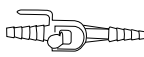





OBJ. ČÍSLO	NÁZEV A POPIS	OBRÁZEK
Láhve		
N077.0082	Láhev 1,5 l, polykar. pro jednoráz. odsáv. Medela vaky s víčkem Úchyt láhve je opatřen odnímatelnou pojistnou sponou a vstupem pro vakuum. Podrobné značení kalibrace po 50 ml na pravé i levé straně láhve. Materiál: hladký silnostěnný polykarbonát, vysoce odolný. Barva značení 1,5 l systému: žlutá. Sterilizace: max. 100 °C, možnost použití plazmy ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0085	Láhev 2,5 l, polykar. pro jednoráz. odsáv. Medela vaky s víčkem Úchyt láhve je opatřen odnímatelnou pojistnou spojovou a vstupem pro vakuum. Podrobné značení kalibrace po 50 ml na pravé i levé straně láhve. Materiál: hladký silnostěnný polykarbonát – vysoce odolný. Barva značení 2,5 l systému: oranžová. Sterilizace: max. 100 °C, možnost použití plazmy ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0110	Láhev 1l, polysulfonová (PS), autokláv. ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0120	Láhev 2l, polysulfon. (PS), autokláv. ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0125	Láhev 0,25 l, polysulfon. (PS), autokláv. – pojistná ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0130	Láhev 3l, polysulfon. (PS) autokláv. ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0150	Láhev 5l, polysulfon. (PS), autokláv. ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0155	Láhev 0,5 l, polysulfon. (PS), autokláv. Vhodná i na odkládání katetrů. ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0531	Zásobník katetrů s držákem na eurolištu (280 mm) ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0532	Zásobník katetrů s držákem na eurolištu (480 mm) ZP-ANO, klasifikační třída I	
NB011600003	Zásobník katetrů se 2 úchyty na eurolištu, nerez/plast (500 mm) ZP-NE	










Víčka		
N077.0420	Víčko velké s kón. spojkou 6–10 mm a pojist. ventilem, autokláv. Pro láhve 1, 2, 3 a 5 litrů. ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0440	Víčko malé s kón. spojkou 6–10 mm a pojist. ventilem, autokláv. Pro láhve 0,25 a 0,5 litrů. ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0450	Víčko malé s kón. spojkou 6–10 mm, pojist. ventilem a úhl. spojkou pro pojist. láhev Pro láhve 0,25 litru. ZP-ANO, klasifikační třída I	
Držáky		
N077.0514	Držák dvojitý pro nádoby na proplachovací láhve – nerez ZP-NE	
N077.0521	Držák láhve na eurolištu – plast ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0522	Držák lahve na lůžko univerzální – nerez ZP-NE	
N077.0523	Držák láhve „C“ na přišroubování – plast ZP-ANO, klasifikační třída I	
N099.0323	Držák síťové šňůry, Basic/Dominant Flex ZP-NE	
Vozíky		
N077.0511	Vozík s eurolištou pro odsávačku MEDELA Vario a centrální sání Pětiramenný, brzděná kolečka ZP-NE	
N077.0741	Vozík s eurolištou pro el. odsávačky MEDELA Basic/Dominant Flex Kolečka antistatická, 2 brzděná a 2 bez brzdy. ZP-NE	
N077.0742	Vozík s eurolištou pro liposukci dvojitý – pro Dominant Flex a DP 30 2patrový vozík pro umístění odsávačky Dominant Flex a infiltrační pumpy DP 30 / DP 30 Plus.. Kolečka antistatická, 2 brzděná a 2 bez brzdy. ZP-NE	

Příslušenství k odsávačkám

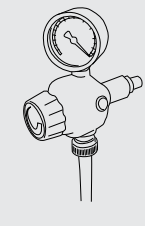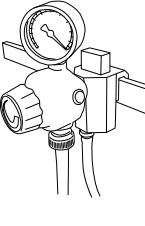OBJ. ČÍSLO	NÁZEV A POPIS	OBRÁZEK
Medela Vaky		
N077.0083	Medela vak 1,5 l – 1 ks MedelaVak obsahuje: víčko, filtrační komoru, předfiltr, hydrofobní a bakteriologický filtr, ochranný kryt proti přesátí, zpětný ventil. Barva: žlutá Možnost sání do 1 vaku až 4 dny 1 pacienta. Lze sériově propojit neomezený počet vaků. Min. balení: krabice: 40 ks karton: 120 ks ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0086	Medela vak 2,5 l – 1 ks MedelaVak obsahuje: víčko, filtrační komoru, předfiltr, hydrofobní a bakteriologický filtr, ochranný kryt proti přesátí, zpětný ventil. Barva: oranžová Možnost sání do 1 vaku až 4 dny 1 pacienta. Lze sériově propojit neomezený počet vaků. Min. balení: krabice: 40 ks karton: 120 ks ZP-ANO, klasifikační třída I	
Bakteriologické filtry		
N077.0571	Filtr MEDELA kombinovaný proti přesátí/bakteriologický, jednorázový – bal. 10 ks Bakteriologický filtr chrání pacienta i personál. Ochranný filtr proti přesátí zabráňuje vniknutí odsávaných tekutin do odsávačky. ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0573	Filtr MEDELA bakteriologický, jednorázový – bal. 10 ks Bakteriologický filtr chrání pacienta i personál. ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0575	Filtr MEDELA kombinovaný protipachový uhlíkový/bakteriologický, jednorázový – bal. 10 ks Bakteriologický filtr pohlcující pachy při operačních zákrocích. Bakteriologický filtr chrání pacienta i personál. ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0581	Filtr MEDELA bakteriologický, autokláv. vč. 50 ks filtr. vložek jednorázových Autoklávovatelný filtr s výměnnými filtračními vložkami. Cena filtrační bakteriální vložky = následný spotřební materiál : 1 ks / 32 Kč vč. 21% DPH ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.1014	Filtr bakteriologický, jednorázový = filtr. vložka do autokláv. filtru 077.0581 – bal. 50 ks Filtrační vložky do autoklávovatelného bakter. filtru Medela N077.0581. Cena: 1 ks / 32 Kč vč. 21% DPH ZP-ANO, klasifikační třída I	

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV A POPIS	OBRÁZEK
Hadice		
N077.0900	Hadice odsávací silikonová, pr. 7/12 mm, autoklávovatelná – 1 m balení: 25 m ZP-ANO, klasifikační třída I	
B011500004	Hadice odsávací PVC CH25 se 2 konektory, 200 cm, nesterilní bal. : 50 ks	
B011500007	Hadice odsávací PVC CH25 se 2 konektory, 200 cm, sterilní bal. : 50 ks	
B011500005	Hadice odsávací PVC CH25 s 1 konektorem a volným koncem, 300 cm, nesterilní bal. : 50 ks	
B011500008	Hadice odsávací PVC CH25 s 1 konektorem a volným koncem, 200 cm, sterilní bal. : 50 ks	
B011500003	Hadice odsávací PVC CH25 s 1 konektorem a přerušovačem sání FingerTipem, 200 cm, nesterilní bal.: 50 ks	
B011500009	Hadice odsávací PVC CH25 s 1 konektorem a přerušovačem sání FingerTipem, 200 cm, sterilní bal. : 50 ks	
Příslušenství ostatní		
N077.1007	Stop ventil bezdotykový, bílý transparentní - sterilní ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.1008	Stop ventil modrý transparentní - sterilní ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0095	Konektor vakua pro sériové propojení MedelaVaků, autoklávovatelný, silikonový Pomocí konektoru vakua lze propojit dvě láhve s MedelaVaky o objemu 1,5 nebo 2,5 litru do série. ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0158	Konektor pacientský s PVC hadicí pro sériové propojení MedelaVaků jednorázový – 1ks Pomocí konektoru pacientského lze propojit dvě láhve s MedelaVaky o objemu 1,5 nebo 2,5 litru do série. Konektor se vsazuje do víčka MedelaVaku. Složení: 1x Konektor s PVC hadicí – 25 cm, bal. 100 ks ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0100	Spojka úhlová žlutá k 1,5l MedelaVakům – 1ks bal.: 10 ks ZP-Náhradní díl	
N077.0101	Spojka úhlová oranžová k 2,5l MedelaVakům – 1ks bal.: 10 ks ZP-Náhradní díl	
N077.0102	Spona pojistná k úchytu láhve na MedelaVaky, plast – 1ks bal.: 10 ks ZP-Náhradní díl	
N077.0542	Konektor pro sériové propojení autokláv. láhví, autoklávovatelný Pomocí sériového konektoru lze propojit dvě láhve do série, nelze použít k propojení MedelaVaků. ZP-ANO, klasifikační třída I	

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV A POPIS	OBRÁZEK
N077.0563	Přepínač vakua vč. hadic, spojek a držáku na eurolištu ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0723	Spínač nožní ON/OFF pro el. odsávačky MEDELA délka: 200 cm ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0094	Nádobka na odběr vzorků na Medela Vak - bal. 10 KS desinfikovatelná, nelze uatoklávovat ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0562	Nádobka na odběr vzorků na víčko N077.0420 - bal. 10 ks desinfikovatelná, nelze autoklávovat ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.1013	Klip k víčku - 1 ks bal.: 10 ks ZP-Náhradní díl	
N077.1017	Spojka propojovací oboustranná, jednorázová - 1 ks Nelze autoklávovat. bal.: 10 ks ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.1018	Spojka propojovací přímá, autoklávovatelná - 1 ks bal.: 10 ks ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.1019	Spojka propojovací 90°, autoklávovatelná - 1ks bal.: 10 ks ZP-ANO, klasifikační třída I	
N074.0009	Kroužek „O“ těsnící modrý pro spojky přímé, 90° a Clario/Clario TONI, autoklávovatelný bal.: 10 ks ZP-Náhradní díl	

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV A POPIS	OBRÁZEK
Regulátory vakua		
N0735138	Regulátor vakua GCE Medievac+ 1000 s rychlospojkou Základní sestava: Regulátor vakua 1000 mbar Otočný manometr 360° Nástavec hadicový Vstupní podtlak: max. - 950 mbar Výstupní potlak: max. - 950 mbar Pracovní podtlak: 0 až -950 mbar Jmenovitý průtok: 70,00 +/-5,00 l/min. Připojení vstup: rychlospojk. nástavec CZ/SK Připojení výstup: G 1/2 ZP-ANO, klasifikační třída IIb	
N0735148	Regulátor vakua GCE Medievac+ 1000 s držákem na eurolištu, s rychlospojkou a vakuovou hadicí Základní sestava: Regulátor vakua 1000 mbar Otočný manometr 360° Nástavec hadicový Držák na eurolištu Hadice vakuová propojovací 1,5 m Vstupní podtlak: max. - 950 mbar Výstupní potlak: max. - 950 mbar Pracovní podtlak: 0 až -950 mbar Jmenovitý průtok: 70,00 +/-5,00 l/min. Připojení vstup: rychlospojk. nástavec CZ/SK Připojení výstup: G 1/2 ZP-ANO, klasifikační třída IIb	
Vakuem extraktory		
N077.0731	Regulátor vakua nožní pro el. odsávačky Medela - vhodný pro vakuem extrakce ZP-ANO, klasifikační třída IIa	
N077.0761	Silc Cup, průměr 50 mm - silikonový zvon pro vakuem extrakci, autoklávovatelný ZP-ANO, klasifikační třída IIa	
N077.0762	Silc Cup, průměr 60 mm - silikonový zvon pro vakuem extrakci, autoklávovatelný ZP-ANO, klasifikační třída IIa	
N077.0078	Silc Cup Trumpet s nerezovým ventilem a držákem, průměr 60 mm - silikonový zvon pro vakuem extrakci ZP-ANO, klasifikační třída IIa	
N077.0080	Caesar Cup, průměr 60 mm - silikonový zvon pro vakuem extrakci, autoklávovatelný ZP-ANO, klasifikační třída IIa	
N077.0791	Silc Cup, průměr 60 mm - TPE zvon pro vakuem extrakci, jednorázový sterilní ZP-ANO, klasifikační třída IIa	
N077.0792	Bird Cup s vychýlitelnou rukojetí, průměr 50 mm - PC zvon pro vakuem extrakci, jednorázový sterilní	

Poznámky

Výrobce:

Medela AG, Medical Technology
Lättichstrasse 4b
6340 Baar
Switzerland
Telefon: +41 415 625 151
Fax: +41 415 625 100
E-mail: info@medela.ch
www.medela.com

Distributor a servisní středisko:

DN FORMED Brno s.r.o.
Hudcova 76a
612 48 Brno
Telefon: +420 532 198 888
Fax: +420 532 198 889
E-mail: dnfomed@dnformed.cz
www.dnformed.cz

